


動脈血ガス (ABG) サンプルング

ラテックスフリー | 単回使用 | 使い捨て

動脈血ガス (ABG) サンプルングは、偶発的な針刺し損傷や血液媒介病原体への曝露を引き起こす可能性のある侵襲的手順です。Pulset™ ABG シリンジは、SafetyTip™ 針刺し保護機能を備えており、ケア環境での偶発的な針刺し損傷を防ぐのに役立ちます。ベントシリンジにより、シリンジ内の空気は、特別に設計されたフィルターとプランジャー設計を介して、プランジャーチップを通過できます。SafetyTip™ 針刺し保護機能は、針の不可欠な部分として設計され、FDA、OSHA および NIOSH のすべてのガイドラインに準拠しています。直感的に片手で安全に作動できるため、習得が簡単で、使うのに便利です。

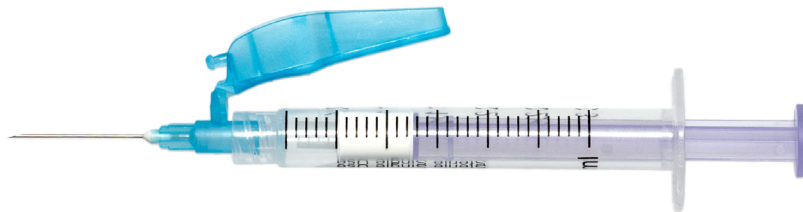

パンクチャーキット



Aラインキット

動脈血ガスサンプルング

- バランスの取れたリチウム / 亜鉛ヘパリン製剤は、血液ガスや電解質の測定に実質的に影響を与えません。
- シリンジバレル全体に配剤された粉末ヘパリンにより、血餅のないサンプルが確保できます。
- 乾燥ヘパリンは、pCO₂ の希釈エラーを排除します。
- 直感的に片手で安全に作動。手は常に針の後ろに置かれます。
- 最小限のインサービスが必要です
- 安全機構は、針の不可欠な部分であり、エンジニアリング制御に関する政府の安全基準に準拠しています
- 保護シースはシリンジバレルに沿っており、挿入部位の最適な視覚化を実現します
- 聴覚的および視覚的確認で、安全機構の作動を確実にします
- 針の上の保護シースを閉じるときに血の飛び散りはありません
- ISO のカラーコード (ISO 6009) に従っているため、針のゲージが簡単に識別できます



3303-91 3302-91 3105-91

設計上特徴的な SafetyTip™ は、挿入部位の最適な視覚化を提供します。針の斜角を上に向けて、保護シースがシリンジバレルに平行に沿うため、遮るものがない鮮明な視界が得られます。また、特許取得済みのデュアルロック設計は、カチッという音で針をしっかりカバーしていることを示して、安全性を高めています。

1cc Pulset シリンジ、ベント付き

製品	説明	アルコール 含浸	ヨードフォア 含浸	ガーゼ	氷 バッグ	包帯	Q-CORK	患者 ラベル	数量
3103-91*	安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH								100
3105-91*	安全チップ付き25g x 5/8インチ針、25u BH								100
3165-91	変更キット、安全チップ付き25g x 5/8インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3173-91	フルキット25g x 5/8インチ針 23g x 1インチ滅菌針、25u BH	X	X	X	X	X	X	X	100

3cc Pulset シリンジ、ベント付き

製品	説明	アルコール 含浸	ヨードフォア 含浸	ガーゼ	氷 バッグ	包帯	Q-CORK	患者 ラベル	数量
3302-91*	安全チップ付き22g x 1インチ針、25u BH								100
3303-91*	安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH								100
3362-91	変更キット、安全チップ付き22g x 1インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3362-91S	変更キット、安全チップ付き22g x 1インチ針ルアースリップ、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3363-91	変更キット、安全チップ付き23g x 1インチ針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3373-91	変更キット安全チップ付き23g x 1インチ針、安全チップ付き22g x 1.5インチ滅菌針、25u BH	X	X	X	X	X		X	100

コードガスケット

製品	説明	アルコール 含浸	ヨードフォア 含浸	ガーゼ	氷 バッグ	包帯	Q-CORK	患者 ラベル	数量
3182-91	コードガスケット、安全チップ付き針付き(2) 22g x 1インチシリンジ、25u BH	X		X		X		X (2)	100

ブラントチップカニューレ付き

製品	説明	数量
3100-30*	Aライン1ccシリンジ ブラントチップカニューレ25u BH	100
3300-30*	Aライン3ccシリンジ ブラントチップ、25u BH	100

Aライン

製品	説明	数量
3100-20*	Aライン1cc シリンジ3cc廃棄用シリンジ25u BH	100
3100-25*	Aライン1cc シリンジ25u BH	100
3300-21*	Aライン3cc シリンジ5cc~6cc 廃棄用シリンジ25u BH	100
3300-25*	Aライン3cc シリンジ25u BH	100

*製品には CE マークが付いています