

safeT™

T-KAPPALE-RESUSKITAATTORI POP-OFF-VENTTIILILLÄ

LATEKSITON | YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN | KERTAKÄYTTÖINEN

T-kappale-resuskitaattori SafeT™ on turvallinen ratkaisu vastasyntyneiden elvytykseen ja CPAP-hoitoon. Se varmistaa jatkuvan happivirtauksen ja pitää samalla sisäänhengityksen huippupaineen (PIP) ja positiivisen uloshengityspaineen (PEEP) vakaana. Näin lääkärit voivat antaa tarvittavaa hengitystukea elvytyksen aikana. SafeT auttaa estämään ylipaineistusta, joka voi johtaa barotraumaan ja ilmarintaan vastasyntyneillä.

Sisäänrakennettu, värikoodattu painemittari hengityspaineiden tehokkaaseen valvontaan



PEEP-valitsimella lääkäri voi asettaa positiivisen uloshengityspaineen; ventilaatiota annetaan sulkemalla PEEP-asteikon aukko ajoittain halutulla hengitystiheydellä, mikä mahdollistaa sisään- ja uloshengityksen


Erikokoisia maskeja saatavilla vastaamaan potilaiden ja sairaalan tarpeita

Happiletku ja punainen yleiskäyttöinen Fits-All-liitin

Käytä valinnaista sisäänhengityspaineen säätimen kiinnitettyä ohituskorkkia, kun tarvitaan yli 40 cm H₂O paineita

safeT™ T-KAPPALE-RESUSKITAATTORI

- Lääkäri voi pitää sisäänhengityksen huippupaineen (PIP) ja positiivisen uloshengityspaineen (PEEP) vakaana
- Vakaat PIP- ja PEEP-paineet takaavat paremman turvallisuuden ventiloitaessa vauvojen hauraita keuhkoja erityisesti hätätilanteessa
- Sisäänrakennettu painemittari näyttää selkeästi hengityspainealueet
- Paineenalennusventtiili auttaa estämään keuhkojen ylipaineistusta
- Voi antaa CPAP-hoittoa
- Sisältää pehmustetun kasvomaskin, joka varmistaa tiiviynä naamariventilaation aikana
- Helppolukuisen säätimen ja painemittarin ansiosta asettaminen on helppoa ja nopeaa
- Yleiskäyttöisen punaisen Fits-All O₂ -liittimen ansiosta voi heti nähdä, onko happiliitäntä asianmukainen

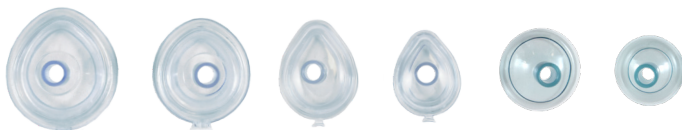

Vauvat

Small, Vauvat

Small, vastasyntyneet

X-Small, vastasyntyneet

Vauvat, pyöreä, pehmeä tiiviste

Vastasyntyneet, pyöreä, pehmeä tiiviste

Laajennettava letku, joka laajenee jopa 45 cm (18") pituuteen

Lääkäri voi asettaa sisäänhengityksen huippupaineen (PIP) sisäänhengityspaineen säätimellä

| NIMIKE | KUVAUS | MASKI | PK |
|--------|----------------------------|-------------------------|----|
| ST710 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | X-Small, Vastasyntyneet | 10 |
| ST711 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Small, Vastasyntyneet | 10 |
| ST712 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Small, Vauva | 10 |
| ST713 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Vauvat | 10 |
| ST714 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Vastasyntyneet, Pyöreä | 10 |
| ST715 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Vauvat, Pyöreä | 10 |
| ST717 | SafeT Pop-Off-Venttiilillä | Ei Maskia | 10 |